

Os modelos antigos de leitoras utilizam cabo de interface serial para comunicação do equipamento com o computador



Printer: porta para conexão com impressora de alguns modelos antigos não é utilizada para comunicação com equipamento.

Como os computadores mais novos não disponibilizam esta entrada e utilizam USB; um conversor serial para USB será necessário

O **cabo de interface serial** usado para conectar o instrumento ao computador é um cabo personalizado, projetado e fabricado pela Molecular Devices

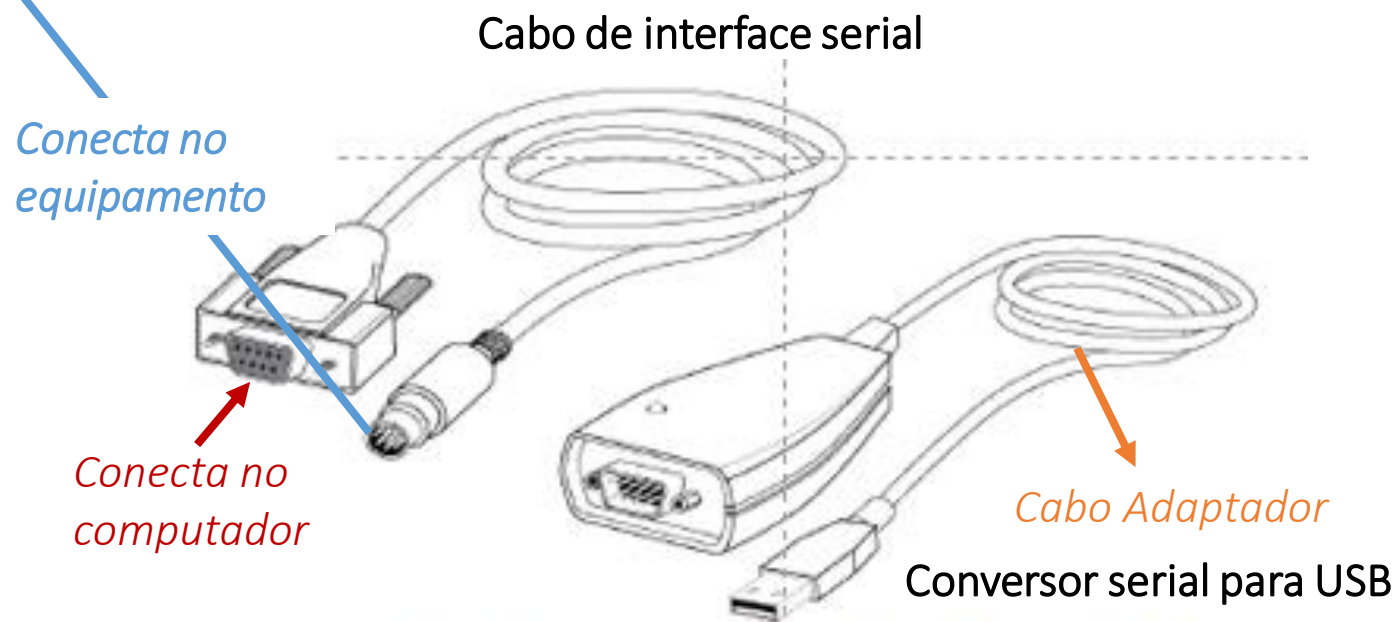


Figure A.1: Molecular Devices' custom serial cable (left) and a serial-to-USB converter (right).

Keyspan USA-19HS foi validado nas leitoras da Molecular Devices